



ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

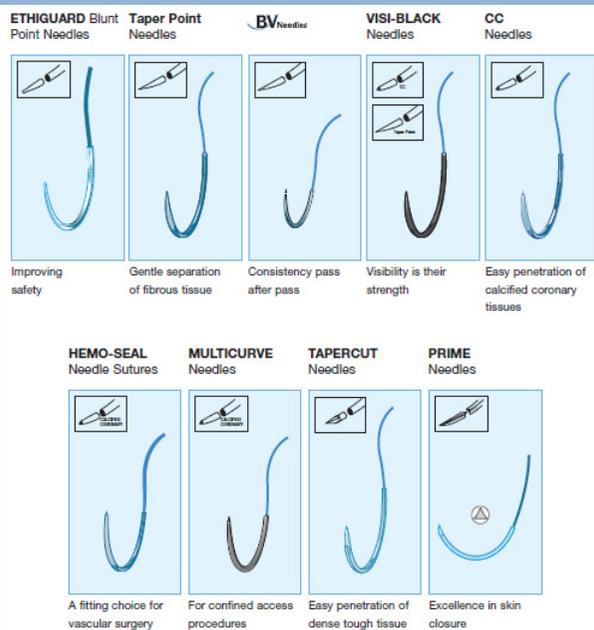

NOS CONTACTS

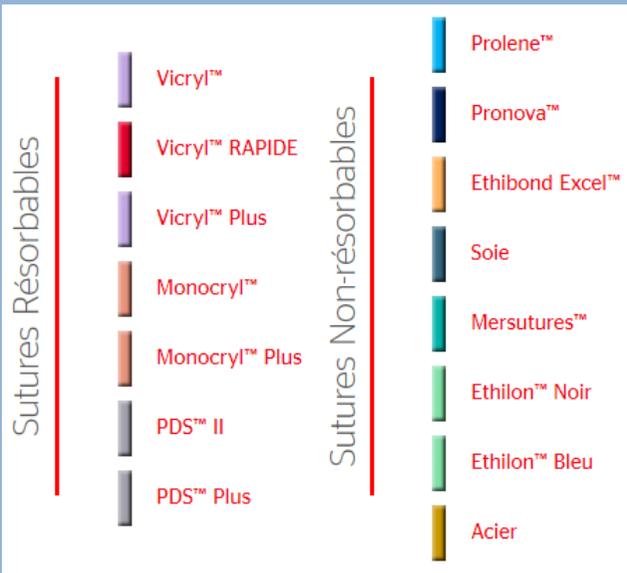

Conseil & Vente


PHYMEP

Emmanuel Montagne

21 Rue Campo-Formio - 75013 Paris

Tél 01 44 24 25 18

Courriel phymep@wanadoo.fr

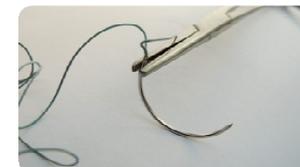

Quelles Sutures

chez les Rongeurs ?

Les conseils du
Dr Delphine Bouard - Vetsalius



Chirurgie & Formation sur site

Dr. Delphine BOUARD

DMV, Dip. Vet. LAS

Courriel delphine.bouard@vetsalius.com

Site <http://www.vetsalius.com>



Crâne (stéréotaxie)

RAT

Tissu sous-cutané

- Vicryl ou PDS II 5/0 (résorbables),
- Aiguille TaperCut ou Prime 1/2 ou 3/8 C, 16mm,
- Surjet préféré.

Peau

- Prolene 5/0 (non résorbables),
- Aiguille Tapercut ou Prime 1/2 ou 3/8 C, 16mm,
- Points simples préférés.

SOURIS

Tissu sous-cutané

- Vicryl ou PDS II 6/0 (résorbables),
- Aiguille TaperCut ou Prime 1/2 ou 3/8 C, 13mm
- Surjet préféré

Peau

- Prolene 6/0 (non résorbables),
- Aiguille Tapercut ou Prime 1/2 ou 3/8, 13mm
- Points simples préférés

Notre Conseil

1. Ne pas abimer les berges de plaie en utilisant un système d'écarteurs adapté pendant la chirurgie (pas de pince hémostatique sur la peau !).
2. Bien refermer les plaies plan par plan (tissu sous cutané puis peau) afin d'éviter de laisser un espace mort sous la peau ce qui engendre de l'inflammation et du prurit.
3. Ne pas trop serrer les points cutanés.

Peau

RAT

Peau

- Prolene 5/0 (non résorbables),
- Aiguille Tapercut ou Prime 1/2 ou 3/8 C, 16mm,
- Points simples préférés.

SOURIS

Peau

- Prolene 6/0 (non résorbables),
- Aiguille Tapercut ou Prime 1/2 ou 3/8, 13mm,
- Points simples préférés.

Notre Conseil

1. Préférer les fils irrésorbables (plus inertes, entraînant moins d'irritation) et monofilament.
2. Utiliser des aiguilles type TaperCut ou équivalentes, de préférence 1/2 ou 3/8 de cercle.

TRES IMPORTANT

Ne pas trop serrer les points sur la peau, laisser de l'espace sous les nœuds.

Vasculaire

Pour attacher un cathéter à un vaisseau, préférer :

- la Soie 5/0 à 6/0 chez les rats,
- la Soie 6/0 à 7/0 pour les souris.

(exemple : pose de cathéter en veine jugulaire)

Pour des anastomoses, utiliser de préférence :

- Fils monofilament (diamètre à adapter à la taille des vaisseaux)
- Aiguilles type Taperpoint, atraumatiques

Organes

Pour suturer des organes creux à la paroi fragile (exemple : intestins, vessie) ou pour suturer des structures fragiles telles que la capsule rénale utiliser impérativement des fils monofilament et des aiguilles atraumatiques type Taperpoint dans des gammes de taille entre 4/0 et 7/0 en fonction de la taille des organes

Pour refermer une laparotomie, faire une suture plan par plan (péritoine et muscles abdominaux puis tissu sous cutané puis peau, trois plans). Utiliser un fil tressé type Vicryl (4/0 pour les rats, 5/0 pour les souris par exemple) pour suturer la paroi abdominale et le tissu sous-cutané. Privilégier les surjets pour les tissus internes.