

Dino-Lite grossissement élevé

Plus d'informations sur www.dino-lite.eu/highmagnification



Dino-Lite grossissement élevé

Les modèles Dino-Lite dans la série équipés d'un grossissement élevé dépassent un grossissement de 200 fois et offrent un grossissement de 400x, 500x ou même un étonnant grossissement de 900 fois. Les microscopes de cette gamme offrent une résolution d'image de 1,3 ou 5 mégapixels, une connexion USB et incluent le convivial logiciel DinoCapture. Les modèles équipés d'un polariseur intégré pour réduire la réflexion ou les modèles possédant un boîtier métallique robuste supplémentaire sont également mis à disposition

Ces caractéristiques uniques font que les modèles Dino-Lite à grossissement élevé sont des outils de grande inspection pour la recherche biomédicale et scientifique, l'analyse des matériaux, le contrôle de l'électronique, ou toute autre application similaire qui nécessite un grossissement élevé, la polyvalence et la mobilité.

principales caractéristiques

- ▶ grossissement jusqu'à 900x
- ▶ 1,3 mégapixels ou 5 mégapixels
- ▶ avec ou sans filtre polarisant
- ▶ boîtier métallique robuste ou un boîtier en composite
- ▶ série edge avec Flexible LED Control (FLC) et Automatic Magnification Reading (AMR)
- ▶ contient le logiciel avancé DinoCapture pour Windows et DinoXcope pour MacOS



gamme AM4113T5



gamme AM4113ZT4



gamme AM4515T5 et T8






gamme AM4013ZT4/AM7013ZT4



gamme AM7515MTx

Dino-Lite grossissement élevé

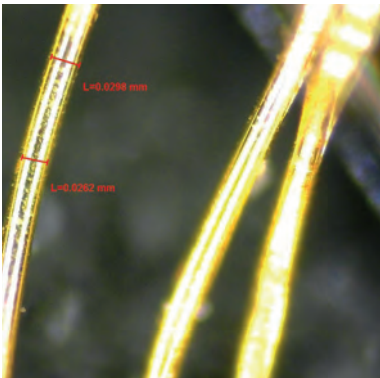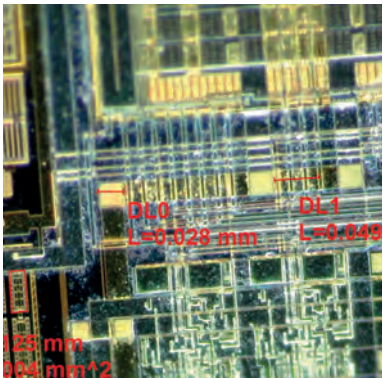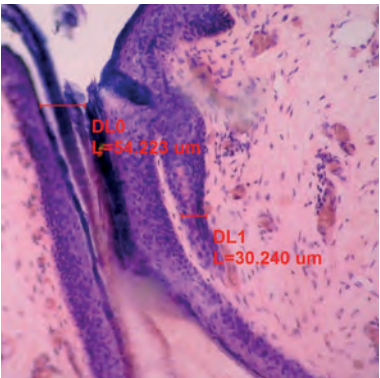

2 2-year European warranty

Regulatory approval: CE, FCC, ROHS

SDK Free SDK available for integration projects

Included software: DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXscope (Mac OS)

Wireless streaming in combination with WF-10 unit

MODÈLE	RÉSOLUTION	AGRANDISSEMENT	CONNECTIVITÉ	LONGUE DISTANCE DE TRAVAIL	MESURE ET CALLIBRAGE	NOMBRE DE DELS	EMBOUTS ECHANGEABLES	POLARISEUR	BOITIER MÉTALLIQUE	PROTEGES ESD	GÉNÉRATION	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	GAMME DE PRIX
GROSSISSEMENT ÉLEVÉ													
AM4113ZT4	1,3 Mégapixels	400 - 470x	USB 2.0	-	✓	8	-	✓	-	-	-	-	€ 300 - 400
AM4013MZT4	1,3 Mégapixels	400 - 470x	USB 2.0	-	✓	8	-	✓	✓	✓	-	-	€ 500 - 600
AM7013MZT4	5 Mégapixels	400 - 470x	USB 2.0	-	✓	8	-	✓	✓	✓	-	-	€ 600 - 700
AM4113T5	1,3 Mégapixels	500x	USB 2.0	-	✓	8	-	-	-	-	-	-	€ 300 - 400
AM4013MT5	1,3 Mégapixels	500x	USB 2.0	-	✓	8	-	-	✓	✓	-	-	€ 400 - 500
AM4515ZT4	1,3 Mégapixels	400 - 470x	USB 2.0	-	✓	8	✓	✓	-	-	Edge	AMR	€ 500 - 600
AM4515T5	1,3 Mégapixels	500 - 550x	USB 2.0	-	✓	8	✓	-	-	-	Edge	AMR	€ 500 - 600
AM4515T8	1,3 Mégapixels	700 - 900x	USB 2.0	-	✓	8	✓	-	-	-	Edge	AMR	€ 600 - 700
AM7515MT4A	5 Mégapixels	415 - 470x	USB 2.0	-	✓	9	✓	-	✓	✓	Edge	AMR/FLC/Coaxial	€ 900 - 1000
AM7515MT8A	5 Mégapixels	700 - 900x	USB 2.0	-	✓	9	✓	-	✓	✓	Edge	AMR/FLC/Coaxial	€ 900 - 1000

produit souligné


Plus d'informations sur www.dino-lite.eu/am4515t8

AM4515T8 – edge

Edge Capteur - AMR - Grossissement Jusqu'à 900x

Avec un grossissement jusqu'à 900x et une optique de haute résolution, ce modèle Dino-Lite à fort grossissement révèle des détails aussi petits que 1,5 micromètre (um). Il dispose également d'une distance de travail supérieure à fort grossissement qui rend plus facile à regarder et à déplacer les très petits objets sous le microscope. Ces caractéristiques uniques font du Dino-Lite AM4515T8 un outil de contrôle idéal pour la recherche biomédicale et scientifique, analyse des matériaux, l'inspection de l'électronique, ou toute autre application similaire qui nécessitent un fort grossissement, une polyvalence et une mobilité.

Le Dino-Lite AM4515T8 est livré avec le logiciel convivial DinoCapture 2.0. Pour ce modèle, il inclut des fonctions telles que la lecture automatique d'agrandissement (AMR), l'étalonnage, la mesure, la capture et l'annotation des images, et l'enregistrement des vidéos. Bien que le modèle de AM4515T8 peut être utilisé à la main, un stand de haute précision est recommandable. Le Dino-Lite RK-10A par exemple, est un excellent complément, il est une solution de support haut de gamme robuste et stable fabriquée en acier inoxydable résistant et en aluminium léger et offre un réglage très précis de la mise au point fine.

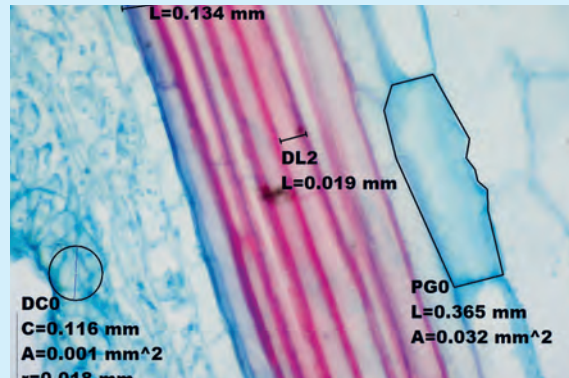

usb 2.0



measurement
functionality



adjustable
~700-900x



automatic
magnification
reading AMR



magnification
lock



1,3 megapixels
1280 x 1024



8 white leds
switchable



exchangeable
caps